



F

PRECILENS B5

Solution multifonctions pour lentilles rigides perméables à l'oxygène

PRECILENS B5 SOLUTION MULTIFONCTIONS

Pour les lentilles rigides. Pour nettoyer, éliminer les dépôts de protéines, rincer, désinfecter, conserver, poser, humidifier et prendre soin des yeux.

DISPOSITIF MÉDICAL

Composition :

Substance active : Poloxamine 0,5%, Dexamphénol 1,0%, HydraFlex-RGP 0,8%. Conservateur : PHMB 0,0001%.

Lisez attentivement les instructions et avertissements pour garantir la bonne utilisation de PRECILENS B5 avec vos lentilles de contact.

Précautions et mode d'emploi :

Lavez-vous soigneusement les mains avant de retirer vos lentilles de contact ou de les sortir de l'étui. Séchez vos mains avec une serviette propre.

Desserrez le capuchon de la bouteille et rompez le scellé de garantie.

Immédiatement après le retrait des lentilles, les laver avec quelques gouttes de PRECILENS B5. Nettoyer les lentilles dans les frottis soigneusement avec l'index dans la paume de l'autre main.

Rincer les lentilles avec PRECILENS B5.

Pour désinfecter les lentilles, remplir le boîtier de PRECILENS B5, y déposer les lentilles et laisser ainsi pendant au moins 4 heures.

Après la désinfection, rincer les lentilles des deux côtés avec PRECILENS B5.

Les lentilles ainsi hydratées au moyen de PRECILENS B5 peuvent être posées sur les yeux.

Rincer le boîtier à lentilles avec PRECILENS B5 (ou une solution saline) et laisser sécher le boîtier à lentilles à l'air libre.

Hydratation : en cas de gêne due à une irritation mineure, lors de port des lentilles, appliquer une goutte de PRECILENS B5 dans l'œil et cligner plusieurs fois des yeux. Il est possible de laisser les lentilles dans les yeux. Si le problème perdure, consulter un spécialiste des lentilles de contact.

Ne touchez pas l'embout compte-gouttes du flacon car cela pourrait contaminer la solution.
Refermez soigneusement le flacon immédiatement après usage.

Indications supplémentaires :

Si la conservation de vos lentilles dépasse 7 jours, celles-ci devront être à nouveau nettoyées et désinfectées avant leur utilisation.

Remplacez régulièrement vos lentilles de contact pour éviter toute infection causée par une contamination.

Avertissements :

Ne pas utiliser si le sceau de garantie est endommagé.

Ne mélangez pas et n'utilisez pas PRECILENS B5 avec d'autres solutions pour lentilles de contact, sauf si cela est indiqué dans la notice.

Remplacer toute solution restante dans l'étui par de la solution neuve.

Ne pas utiliser après la date d'expiration.

Ne changez pas votre système de lentilles de contact sans consulter votre médecin/ spécialiste en lentilles de contact.

Ne jamais utiliser de l'eau du robinet.

Ne pas utiliser :

Si il vous a été prescrit un médicament oculaire, consultez votre ophtalmologiste ou un professionnel des soins oculaires avant d'utiliser ce médicament en combinaison avec des lentilles de contact.

En cas d'irritation cesser l'utilisation et consulter votre médecin / spécialiste en lentilles de contact.

Conserver :

Tenir hors de portée des enfants.

A conserver entre 4 °C et 25 °C.

Protéger de la lumière du soleil.

Conservez la solution dans son emballage d'origine.

A utiliser dans les 2 mois après l'ouverture.

Effets secondaires :

Ne pas utiliser PRECILENS B5 en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à l'un des composants.

E

PRECILENS B5

Solución multifunción para lentillas rígidas permeables al oxígeno

SOLUCIÓN MULTIFUNCIÓN PRECILENS B5

Para limpiar, eliminar depósitos proteicos, aclarar, desinfectar, guardar, colocar, hidratar y cuidar los ojos... todo en uno. Para las lentes de contacto RPG.

DISPOSITIVO MÉDICO

Composición:

Sustancias activas: poloxamina 0,5 %, dexamfetol 1,0 %, HydraFlex-RGP 0,8 %. Conservante: PHMB 0,0001 %.

Para un uso correcto de PRECILENS B5 con sus lentes de contacto, lea las instrucciones y las advertencias detenidamente.

Precauciones y instrucciones de uso:

Lávese cuidadosamente las manos antes de quitarse las lentes o sacarlas del soporte. Séquese las manos con una toalla limpia.

El precrinto de garantía del frasco se rompe al desenroscar el tapón. Inmediatamente después de quitarse las lentes, límpielas con algunas gotas de PRECILENS B5. Limpie las lentes frotándolas suavemente con el dedo índice en la palma de la otra mano.

Enjuague las lentes con PRECILENS B5.

Para desinfectar las lentes, colóquelas en la caja de lentes llena de nuevo PRECILENS B5 y dejé reposar durante al menos 4 horas.

Después de desinfectar, enjuague ambos lados de la lente con PRECILENS B5. A continuación, se pueden insertar las lentes humidificadas PRECILENS B5.

Enjuague la caja de la lente con PRECILENS B5 (o una solución salina) y dejé que la caja de la lente se seque al aire.

Hidratación: si le molesta una pequeña irritación mientras usa las lentes, aplique una gota de PRECILENS B5 en el ojo y párpadee varias veces. Puedes dejar tu lente en el ojo. Si los problemas continúan, consulta a su especialista en lentes de contacto.

No toque el dosificador, ya que podría contaminarse la solución.

Cierre bien el frasco inmediatamente después de utilizarlo.

Otras instrucciones:

Si las lentillas se guardan durante más de 7 días consecutivos, deberán limpiarse y desinfectarse de nuevo antes de introducirlas en los ojos.

Sustituya el estuche de las lentes con frecuencia para evitar infecciones debido a la contaminación.

Advertencias:

No usar si el precrinto de garantía está dañado.

No mezcle o utilice PRECILENS B5 con otros líquidos de lentes de contacto, salvo que se indique en las instrucciones de uso.

Reemplazar la solución restante en el caso de la lente siempre con líquido nuevo.

No utilizar después de la fecha de caducidad.

No cambie su sistema de lentes de contacto sin haber consultado con su médico/especialista en lentes de contacto.

Nunca utilice agua del grifo como alternativa a este líquido para lentes de contacto.

No usar:

Si le recetan medicamentos para los ojos, consulte a su oftalmólogo u oculista antes de utilizar este medicamento en combinación con lentes de contacto.

En caso de irritación de los ojos, deje de utilizar la solución y consulte a su médico/consultólogo.

Conservar:

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Conservar a entre 4 °C y 25 °C.



Proteger de la luz solar.

Conserve la solución en su envase original.

No usar después de 2 meses después de la apertura.

Efectos secundarios:

En caso de hipersensibilidad a uno de los componentes, no usar PRECILENS B5.

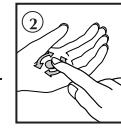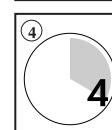



UK

PRECILENS B5

All in one solution for RGP contact lenses

PRECILENS B5 All in One solution

For cleaning, removing of protein deposits, rinsing, disinfecting, storing, inserting, moistening and eye care... All in one. For RGP contact lenses.

MEDICAL DEVICE

Composition:

Active Ingredient: Poloxamine 0,5%, Dexpanthenol 1,0%, HydraFlex-RGP 0,8%.
Preservative: PHMB 0,0001%.

Read the instructions and warnings carefully for proper use of the PRECILENS B5 in combination with your contact lenses.

Precautions and instructions for use:

Wash your hands carefully before removing the lenses from your eyes or the lens case.
Dry your hands using a clean towel.

Unscrewing the cap from the bottle will break the guarantee seal.

Immediately after removal of the lenses, clean them with a few drops PRECILENS B5.
Clean the lenses by carefully rubbing them with your index finger in the palm of your other.

Rinse the lenses with PRECILENS B5.

To disinfect the lenses, place them in the lens case filled with fresh PRECILENS B5 and leave to stand for at least 4 hours.

After disinfecting, rinse both sides of the lens with PRECILENS B5.

The PRECILENS B5 -moistured lenses can then be inserted.

Rinse the lens case with PRECILENS B5 (or a Saline solution) and allow the lens case to dry in the air.

Moisturizing: if you are bothered by minor irritation while wearing the lenses, apply a drop of PRECILENS B5 to the eye and blink several times. You can leave your lens in the eye. If problems continue, consult your contact lens specialist.

Do not touch the dropper tip of the bottle as this may contaminate the solution.

Close the bottle tightly immediately after use.

Other instructions:

After storage in excess of 7 days, lenses must be cleaned and disinfected again before wear.

Replace your lens case frequently to prevent infection due to contamination.

Warnings:

Do not use if guarantee seal is damaged.

Do not mix or use PRECILENS B5 with other contact lens fluids, unless it is indicated in the instructions for use.

Always replace any remaining solution in the lens-case with fresh solution.

Do not use after the expiry date.

Do not change your contact lens system without consulting your doctor / contact lens specialist.

Never use tap water as an alternative for this contact lens fluid.

Do not use:

If you are prescribed eye medication, consult your ophthalmologist or contact lens specialist before using the medication in combination with contact lenses.

In case of eye irritation, discontinue use and consult your doctor/contact lens specialist.

Store:

Keep out of the reach of children.

Store between 4°C and 25°C (40°F and 77°F).

Protect from sunlight.

Keep the solution in its original packaging.

Use within 2 months of opening.

Side effects:

Do not use PRECILENS B5 All in One solution + B5 if you are allergic to one of the ingredients.



Oté Pharma Sol BV
Vluchtoord 38
NL-5406 XP Uden

Distributeur / Distribución /
Distributor / Vertrieb:
PRECILENS, 25 rue Auguste Perret
94000 CRÉTEIL - France

06REF0659
07/2019

D

PRECILENS B5

All-in-one Lösung für RGP Kontaktlinsen

PRECILENS B5 Alles in Einem-Lösung

Zum Reinigen, Entfernen von Proteinalagerungen, Abspülen, Desinfizieren, Aufbewahren, Einsetzen, Benetzen und zur Augenpflege... alles in einem. Für RGP Kontaktlinsen.

MEDIZINPRODUKT

Zusammensetzung:

Wirksame Substanz: Poloxamine 0,5%, Dexpanthenol 1,0%, HydraFlex-RGP 0,8%.
Konservierungsmittel: PHMB 0,0001%.

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise aufmerksam durch, um PRECILENS B5 in Kombination mit Ihren Kontaktlinsen sachgemäß anzuwenden.

Vorsichtsmaßnahmen und Gebrauchsanweisung:

Waschen Sie sich bitte sorgfältig die Hände, bevor Sie die Kontaktlinsen aus dem Auge oder aus dem Linsenbehälter nehmen. Trocknen Sie die Hände an einem sauberen Handtuch ab.

Das Öffnen des Schraubverschlusses der Flasche bricht das Garantiesiegel auf.
Die Linsen sofort nach dem Herausnehmen mit einige Tropfen PRECILENS B5 reinigen.
Die Reinigung erfolgt, indem die Linsen in der Handfläche mit dem Zeigefinger der anderen Hand leicht massiert werden.
Die Linsen mit PRECILENS B5 abspülen.

Zur Desinfektion die Linsen mindestens 4 Stunden lang durchgehend in den Kontaktlinsenbehälter legen, der mit frischem PRECILENS B5 gefüllt ist.

Die Linsen sofort nach dem Herausnehmen von beiden Seiten gründlich mit PRECILENS B5 abspülen.

Nach der Desinfektion können die mit PRECILENS B5 angefeuchteten Linsen sofort eingesetzt werden.

Spülen Sie den Kontaktlinsenbehälter mit der PRECILENS B5 (oder mit Salina aus) und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Benetzen: wenn Sie während des Tragens der Kontaktlinsen Irritationen verspüren, können Sie einen Tropfen PRECILENS B5 ins Auge tropfen und einige Male blinzeln. Sie können die Kontaktlinse im Auge behalten. Bei anhaltenden Beschwerden sollten Sie einen Kontaktlinsenspezialisten konsultieren.

Verunreinigungen vermeiden. Öffnung nicht berühren.
Flasche nach Gebrauch sofort verschließen.

Sonstige Anweisungen:

Werden die Linsen länger als 7 Tage in der Lösung aufbewahrt, müssen die Linsen noch mal gereinigt und desinfiziert werden.

ersetzen Sie Ihr Kontaktlinsenbehältnis häufig, um eine Infektion aufgrund einer Verunreinigung zu vermeiden.

Warnhinweise:

Nicht verwenden, wenn das Garantiesiegel beschädigt ist.

Mischen oder verwenden Sie PRECILENS B5 nicht mit anderen Kontaktlinsenflüssigkeiten, außer wenn es in der Gebrauchsanweisung angegeben ist.

Gegebenenfalls im Linsenbehälter überig bleibende Lösung stets durch frische Lösung ersetzen.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Verändern Sie nicht Ihr Kontaktlinsensystem, ohne zuvor Ihren Arzt/Kontaktlinsenspezialisten um Rat zu fragen.

Benutzen Sie niemals Leitungswasser als Alternative für die Linsenflüssigkeit.

Nicht verwenden:

Sollten Sie ein Augenmedikament benutzen, ziehen Sie Ihren Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialist zu Rate, bevor Sie das Medikament in Kombination mit den Kontaktlinsen verwenden.

Bei Augenreizung mit dem Gebrauch aufhören und Ihren Arzt oder Kontaktlinsenspezialisten konsultieren.

Aufbewahren:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Aufbewahrungs temperatur 4°C bis 25°C.

Schutz vor Sonnenlicht.

Bewahren Sie die Lösung in der Originalverpackung auf.

Nach Öffnen der Flasche die Lösung innerhalb von 2 Monaten verwenden.

Nebenwirkungen:

Nicht anwenden bei Unverträglichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe von PRECILENS B5.

