

Des solutions uniques pour **le contrôle
de la myopie** des enfants et des jeunes

Gamme DRL en ORTHO-K
Gamme PRE AMYOPIC en port diurne



EXPERT EN PRÉVENTION ET CONTRÔLE DE LA MYOPIE

Precilens

GAMME DRL en ORTHO-K

La solution de 1^{ère} intention pour un contrôle optimal de la myopie

UNE GÉOMÉTRIE INNOVANTE POUR UN TRAITEMENT PERSONNALISÉ

- 1^{er} réservoir de larmes (anneau rouge sur les topographies)
 - Génère une puissance positive permettant de contrôler l'évolution de la myopie en modifiant l'image rétinienne périphérique (défocalisation myopique)
- Zone optique adaptée selon la myopie
 - Zone d'addition plus proche du centre de l'aire pupillaire
- Double réservoir
 - Meilleur centrage et efficacité de traitement renforcée



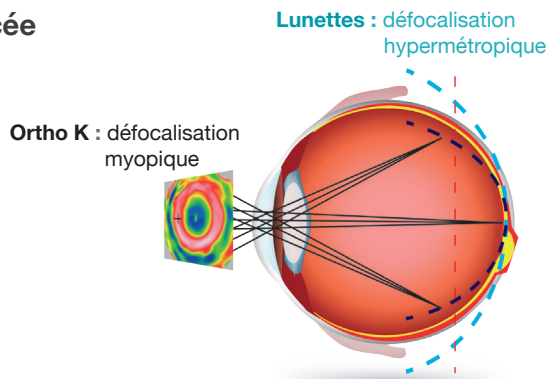


Image rétinienne périphérique selon équipement optique

DEUX DESIGNS UNIQUES TENANT COMPTE DU NIVEAU DE MYOPIE

- DRL Contrôle Myopie dédié aux myopies jusqu'à -7.00 D* (enfants et jeunes)

- 1^{er} réservoir de larmes ajusté à la correction
- Zone optique personnalisée (5 mm)
 - Zone d'addition dans l'aire pupillaire
- Double réservoir

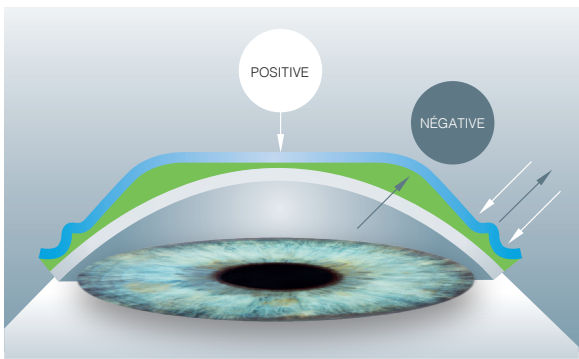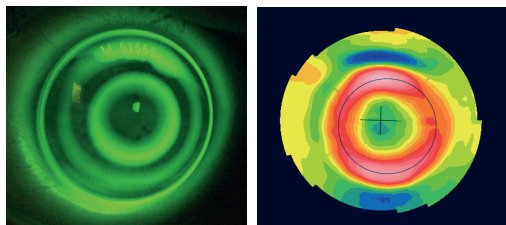



DRL Contrôle Myopie -5.00

- DRL PREVENTION dédié aux faibles myopies (enfants < 17 ans)

Myopia Active Care (MAC) :

système unique de prise en charge des faibles myopies qui génère l'addition nécessaire pour les myopies ≤ 4.00 D*

- Design spécifique du 1^{er} réservoir pour une clairance augmentée
 - Augmente la quantité d'addition générée
 - Renforce l'effet freinateur
- Zone optique personnalisée optimisée (< 5 mm)
 - Intégralité de la zone d'addition dans l'aire pupillaire
 - Meilleure défocalisation périphérique
- Double réservoir

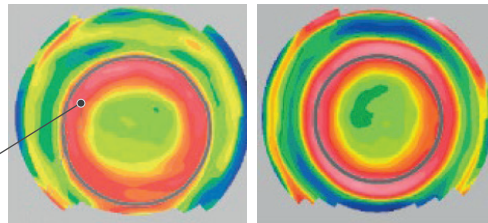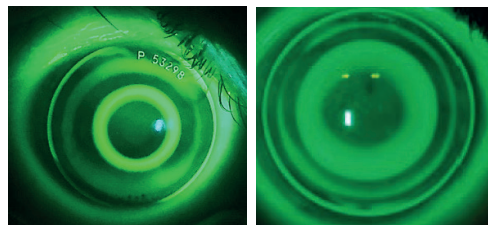

PREVENTION -2.00

DRL Contrôle Myopie -2.00

Addition augmentée rapprochée


*Astigmatisme jusqu'à -4.00 D

GAMME PRE AMYOPIC en port diurne

La solution lorsque le port nocturne n'est pas adapté

UN CONCEPT UNIQUE DE GRADIENT DE PUISSANCE

- Gradient de puissance ajustable
 - Crée une défocalisation myopique en rétine périphérique permettant de contrôler l'évolution de la longueur axiale responsable de l'évolution myopique.

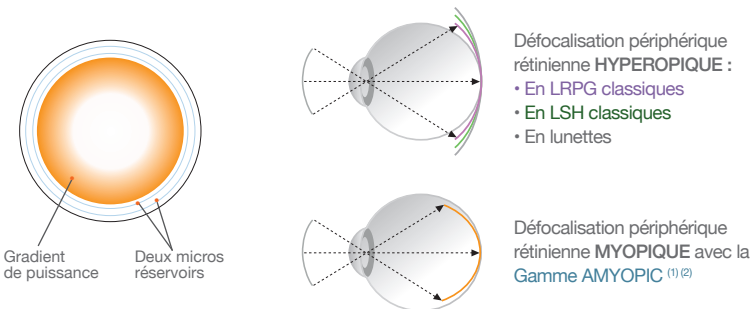

2 micros réservoirs périphériques

- Permettent une plus grande stabilité de la lentille, une vision performante et un confort optimal.

2 options : Enfant < 17 ans et Jeune < 25 ans

- Gradient de puissance réévalué selon l'âge du porteur pour garantir le meilleur compromis entre le contrôle de la myopie et le confort visuel
- Réalisable en LSH trimestrielles (AMYOPIC Silicone) en cas d'échec en LRPG
Sphères : -0,25 à -15,00 / Cyl jusqu'à -6.00 / Axes par 5° / r_o = km + 0,70 / ØT = DHIV + 3.00 mm

GAMME ET ADAPTATION

	PRE AMYOPIC	PRE AMYOPIC toric
Matériau	Première intention Boston XO2 avec filtre UV (DK 141) ou Optimum 125 avec filtre UV (DK 125) / autre sur demande	
Teinte de manipulation	OD Violet / OG Bleu	
Géométrie	Bi-asphérique avec 2 micros réservoirs	
r _o	7.20 à 8.60 par 0.05	
Excentricités	Dégagements modifiables par pas de 0,10	
Ø _T	9.00 à 11.10 par pas de 0.30	
Sphères	Plan à -20.00	
Cylindres	TI : -1.50 à -8.00 par 0.25 TE : -0.75 à -4.00 par 0.25	
Adaptation	Ø _T = 10.20 Toricité < 30/100 r _o = K Toricité ≥ 30/100 TI calculée par le laboratoire Ø Zo constante : pas de modification du r _o si changement Ø _T	

- Gradient de puissance ajustable
- Hyper DK pour un port sécuritaire
- Périphérie modifiable



1) Efficacy of a gas permeable contact lens to induce peripheral myopic defocus, Optometry and Vision Science, Vol 92, N°5, May 2015, Jaime PAUNÉ, Antonio QUEIROS, Daniela LOPES-FERREIRA, Miguel FARIA-RIBEIRO, Lluís QUEVEDO, Jose Manuel GONZALES-MEIJOME

2) Myopia Control with a Novel Peripheral Gradient Soft Lens and Orthokeratology: A 2-Year Clinical Trial, BioMed Research International Volume 2015, Jaime Pauné, Hari Morales, Jesús Armengol, Lluís Quevedo, Miguel Faria-Ribeiro, and José M. González-Méjome

Des solutions uniques pour le contrôle de la myopie des enfants et des jeunes

GAMME DRL en ORTHO-K

1^{ère} intention pour un contrôle optimal de la myopie

GAMME PRE AMYOPIC

lorsque le port nocturne n'est pas adapté

ENTRETIEN

PACK ORTHO-K 1^{ers} Pas offert *

pour le 1^{er} mois d'essai en lentilles DRL

- 1 flacon OXYClean • 1 boîte de 30 doses AQUADROP+ • 1 ventouse

Offre à valeur d'échantillon et non contractuelle.

PACK ORTHO-K 3 mois

pour les porteurs confirmés

- 2 flacons OXYClean • 3 boîtes de 30 doses AQUADROP+ • 1 boîte de ProCare

Franco de port à l'unité chez tous les opticiens



PACK PRE AMYOPIC offert *

- 2 flacons OXYClean + 1 boîte de ProCare en accompagnement de 2 PRE AMYOPIC ou 2 boîtes AMYOPIC Silicone

Franco de port à l'unité chez tous les opticiens

Sur demande uniquement



Vidéos de manipulation et d'entretien :

www.lentilledenuit.com | www.precilens.com

COMMANDES

LOGICIEL CLICK & FIT

technique@precilens.com

Données indispensables :

- Réfraction sous cycloplégique
- Exportation des topographies
- DHIV mesuré au réglet

Service urgence perte ou casse :

Fabrication prioritaire

Tél. 01 45 13 18 45

avec le n° traçabilité de la lentille

SERVICE COMMANDE

commande@precilens.com

Tél : 01 45 13 18 45 - Fax : 01 45 13 18 46

Données indispensables :

- Réfraction VL maxi-convexe
- Kératométrie
- DHIV mesuré au réglet

PROGRAMME SMS OBSERVANCE

Service offert : réception par les porteurs d'un SMS les invitant à renouveler leurs lentilles avant la date recommandée pour une sécurité de port renforcée.

Service aux Professionnels :

Tél : +33 (0)1 45 13 18 49 • Fax : +33 (0)1 45 13 18 46 • E-mail : technique@precilens.com



EXPERT EN PRÉVENTION ET CONTRÔLE DE LA MYOPIE

Precilens